



## RLI MASSZÍROZÓ ESZKÖZ + RLI MASSAGE PRODUCT +



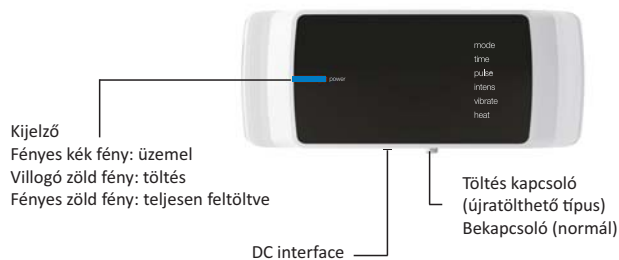
A kép csak illusztráció!

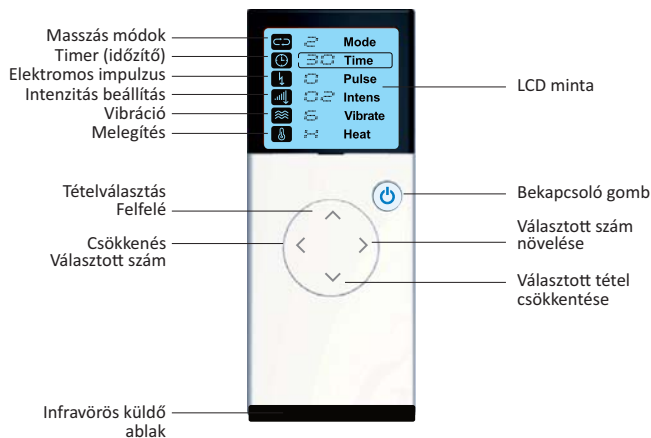
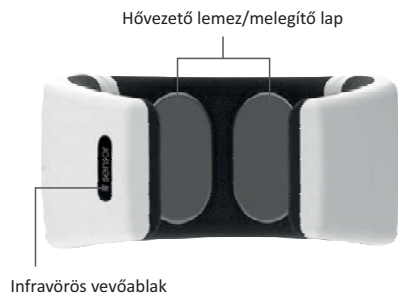
### Termék bemutatás

A nyaki ívre tervezett eszköz az alacsony frekvenciájú elektromos, mágneses, infravörös funkciót és a vibrációs masszázst alkalmazhatja, hogy átalakíthassa az energia mezőket a test szóban forgó mély területébe való belépéshez. Ez a masszázs a vérkeringést stimulálhatja és pihentetheti a regionális izmokat, így akár kiküszöbölve a gyulladást, duzzadást, fájdalmat, a fáradtságot és a fejfájást.

### Termék részletes leírás

- A nyaki ívhez alkalmazkodóan tervezték
- Az infravörös melegítés, az elektromos impulzus, a vibrációs masszázs és a mágneses mező kombinálása akár egy kiváló összetételű energiamezőt hozhat létre
- A hőmérséklet beállítás a személyi szükségletekhez és referenciákhoz igazodhat
- Ami az elektromos impulzust illeti, akár két különböző automatikus módszert alkalmazhat, négy különböző kézi funkcióval a személyes szükségletek és preferenciák szerint
- Akár 6 különböző vibrációs masszázs lehetséges a szükségletek és preferenciák szerint
- A beépített mágnes akkupontokat hozhat létre testen belül, így akár egyensúlyozhatja a testben a Yin&Yang-ot a mikro-cirkuláció javítása érdekében
- Könnyen üzemel távkapcsolóval és háttér-világítású LCD képernyővel




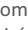







## ÜZEMELTETÉSI MÓDOK


### Töltés

- Adapter a töltéshez dugja be az adaptert az eszközbe és a tápegységbe.
- **A készülék bekapcsolt állapotban tölthető!**
- Újratöltés (újratölthető típushoz). Ha nem használ adaptert, akkor beágyazott, újratölthető elemeket kell alkalmazni.

## MŰKÖDTETÉS

- 1.) Állítsa a bekapcsoló gombot „ON” pozícióba
- 2.) Bevezetett törölközővel nedvesítse be kissé a nyaki részt és a fémét. Törölje le az izzadságot/veritéket a nyakról. Aztán csatolja az eszközt a nyakra
- 3.) Nyomja le a  gombot a működés indításához. Megjegyzendő, hogy az indításkor zümmögés és fény indikálódik. Az LCD a távoli kijelzőkön megjeleníti amint automatikus módba lép. (magas hő. Sok-funkciós vibráció, első vibrációs masszázs, az időzítő 15 percre van beállítva) nyomja le újra a  gombot a használat befejezéséhez. Amikor a távirányító és masszírozó berendezés szinkronba kerül egy kis zümmögés lesz hallható.

- 4.) A következő gombokat kell használni a módok felfelé léptetéshez „^” gomb, a módok lefelé léptetéshez „v” gomb.
- 5.) A következő gombokat kell használni a csökkentéshez „<” gomb, és a növeléshez „>” gomb
- 6.) *Módok cseréje*  
Az „^” & „v” gombokkal válassza a  jelet aztán nyomja meg a „<” vagy „>” gombot, hogy választhasson a hat különböző módból, amelyet a következőképpen jelöltek.  
1-AUTO-MODE, amely magába foglalja a következőket:  
Vibráció és melegítés, melegítés és elektromos impulzus, melegítés, vibráció, elektromos impulzus auto keringés. 2-vibráció és melegítés. 3-melegítés és elektromos impulzus. 4-melegítés. 5-vibráció. 6-elektromos impulzus
- 7.) *Üzem intenzitás*  
Az „^” és „v” gombokkal válassza ki a  jelet, aztán nyomja meg a „<” vagy „>” gombot, hogy megváltoztassa az elektromos impulzus intenzitást (16 szint) vagy a vibráció intenzitást (3 szint)
- 8.) *A melegítő mód átalakítása*  
Az „^” és „v” gombokkal válassza a  jelet aztán nyomja meg a „<” vagy „>” gombot, hogy beállítsa a melegítést akár a magas (H), akár az alacsony (L) vagy a nem (O) fokozatra.
- 9.) *Elektromos impulzusról*  
Az „^” és „v” gombokkal válassza a  jelet aztán nyomja meg a „<” vagy „>” gombot, hogy válasszon a 6 impulzus módból
- 10.) *Vibrációs módok*  
Az „^” és „v” gombokkal válassza a  jelet aztán nyomja meg a „<” vagy „>” gombot, hogy válasszon a 6 impulzus módból, beleértve az auto-vibrációs masszázs módot, csak a vibrációt, gyúrás, ütögetést, a nyomást és a dörzsölést.

- 11.) A timer működtetése  
Az „^” és „v” gombokkal válassza a  jelet, aztán nyomja meg a „<” vagy „>” gombot, hogy beállítsa az időt 5-től 30 percig 5 perces intervallumokkal.
- 12.) Újratölthető akkumulátor  
Töltse fel amikor kevés az energia. Csak kapcsolja be az „ON/CHARGE/” gombot „CHARGE” pozícióba, az indikátor zöldre vált és villog. Ha a villogás abba marad és egyenesen zöld az azt jelenti, hogy teljesen feltöltődött. 3-4 órát vesz igénybe, míg az aku teljesen feltöltődik.
- 13.) Ajánlatos ezt a masszírozó eszközt naponta kétszer használni 15 perces vibrációs és elektromos impulzus módban és 15 perc melegítéssel.

## FIGYELMEZTETÉS

- Nem használható PACEMAKER-el.
- Ne használja mikro sütő vagy egyéb infravörös sugarakat kibocsátó berendezések közelében
- Használat előtt konzultáljon orvosokkal.
- Ne használják alvás és zuhanyzás közben
- Nem gyermekek ill, kommunikáció képtelenek számára készült
- Ne használják azok, akik bőr- és hőérzékenyek
- Használat közben ne állítson a működés módon. Kapcsolja ki és állítsa be újra.
- A megnövelt nyomás, áram vagy hő intenzitás nem vezet hatékonyabb terápiához.
- Ne szerlje szét, ne merítse vízbe ill. ne használjon vizet a készülék tisztítására.

## Tisztítás és karbantartás

1. Használjon puha, alig nedves törlőruhát
2. Tárolja száraz jól szellőző helyen
3. Ne tárolja direkt napfénynek kitétt vagy extrém nedves helyen



## KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE

1. Az indításkor tartsa egymással szembe az infravörös fény kibocsátó ablakot a vezérlő szerkezeten és a fő egységen lévő infravörös fényt fogadó ablakot a mint az a fenti képen látható. Ez a pozíció szükséges ahhoz, hogy a távirányító működjön. Minden érvényes távkapcsolásnál egy „beep” hallható, amikor elindul.
2. Kérjük, tölts fel, amikor már kicsi a kapacitás. Csak kapcsolja az ON/CHARGE gombot a CHARGE pozícióba, az indikátor villogó zöld lesz, és amikor megszűnik a villogás és egyenletesen zöld, az azt jelenti, hogy már teljesen feltöltődött. A teljes töltés 3-4 órát vesz igénybe.
3. Ha a távkapcsoló nem működik, amikor a fő egység fel van töltve és az egységek összhangban vannak, kérjük, cserélje ki a CR2032 –az elemet a távirányítóban

### Műszaki leírás

Megnevezés: RLI Masszírozó eszköz +

Súly: 630 g

Modell szám: KTR 101

Teljesítmény: szerkezet: 6 VDC ≤ 6W

Vezérlő kapcsoló CR2032 gombelem 3VDC

Elektromos impulzus frekvencia: 1-1000Hz

Elektromos impulzus szélesség: 20-400 us

Elektromos impulzus hullám: négyzetjel ajándékdobozban (248x231x77mm)

Melegítési hőmérséklet: +40°C-+48°C ( 25 Celsius fok alatt)

### EU forgalmazó:

MANETSPACE LIMITED COMPANY

15 Clifton Place, Plymouth, United Kingdom, PL4 8HU U.K.

Company Nr.: 099955538

A forgalmazó és eladó cég egészségmegőrzés, közérzetjavítás céljára ajánlja a készüléket.